


Мешалка магнитная с подогревом MSH-30D

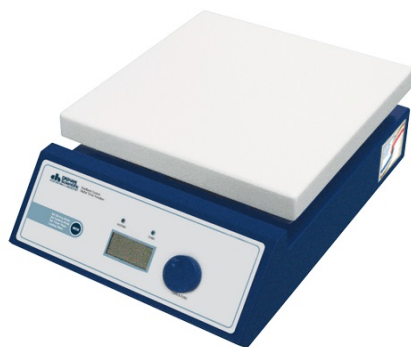

Магнитные мешалки с подогревом серии MSH-D предназначены для перемешивания и нагрева жидкостей объемом до 20 литров. Максимальная регулируемая температура нагрева – 380 °С. Регулирование температуры производится с высокой точностью - погрешность регулирования температуры не более $\pm 0,3$ °С. Цифровой контроль с обратной связью и регулирование параметров работы с помощью встроенной панели управления.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd
Модель: MSH-30D
Страна: Республика Корея

Причины использовать магнитные мешалки с подогревом серии MSH-D в вашей лаборатории:

- Диапазон регулировки скорости перемешивания – от 80 до 1500 оборотов/мин, шаг регулирования – 5 оборотов/мин
- Функция компенсации отличия значений заданной и фактической температуры
- Платформа мешалки – с керамическим покрытием, устойчива к химическим воздействиям, легко очищается
- Регулирование и установка скорости перемешивания, температуры и времени таймера осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без
- Установленные и фактические значения скорости перемешивания, температуры и времени таймера отображаются на встроенном ЖК-дисплее
- Возможность крепления к корпусу прибора штатива для внешнего датчика температуры
- Разъем для подключения внешнего датчика температуры
- Магнитный якорь входит в комплект поставки
- Магнитные мешалки с подогревом серии MSH-D оснащены защитой от перегрева

Характеристики

Дисплей	сенсорный цветной
Материал платформы	
Безопасность	блокировка перегрева, индикация горячей поверхности платформы выше 50 °С
Управление	цифровой контроллер с поворотным кольцом Jog-Shuttle
Погрешность регулирования температуры	±0,2 °С
Максимальное время таймера	99 ч 59 мин
Диапазон регулировки скорости перемешивания	От 100 до 2500 оборотов/мин
Магнитный якорь	3 см – в комплекте поставки,
Максимальный объем перемешивания	20 л
Шаг регулирования скорости перемешивания	5 оборотов/мин
Максимальная регулируемая температура нагрева	380 °С
Размер платформы	260×260 мм
Комплектация	1) Unit Only – мешалка и магнитный якорь;