


Дисковая мельница 1600 для пшеницы

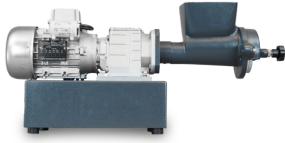

Дисковая мельница (измельчитель) Bastak 1600 для пшеницы используется в пробоподготовке для анализа влаги в сушильной печи. Принцип работы основан на измельчение образца на более мелкие кусочки в зерновых и масличных культурах. Размер частиц образца можно регулировать, за счет шлифовальных дисков от 0,2 до 15 мм.

Производитель: Bastak Instruments
Модель: 1600
Страна: Турция

Особенности: Производительность измельчения составляет 50-100 г/мин в зависимости от плотности продукта; Возможность регулирования частиц образца, за счет шлифовальных дисков; Нет потери влаги во время измельчения; В измельченных продуктах корка и внутренняя часть семян (например, мука и отруби в пшенице) собираются в один сборный контейнер; Чувствительное питание.

Характеристики

Электропитание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	700 Вт
Размер частиц	от 0,2 до 15 мм
Производительность измельчения	от 50 до 100 г/мин
Габаритные размеры (Д)х(Г)х(В)	550х250х260 мм
Вес	12 кг