


Автоматический компактор Маршалла

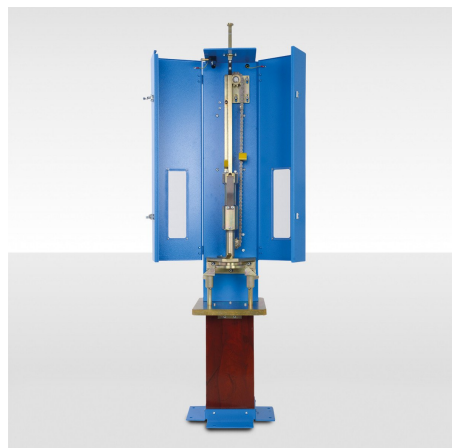

Автоматический ударный уплотнитель по схеме Маршалла, для образцов диаметра 4".

Производитель: UTEST
Модель: UTAS-0782A
Страна: Турция

Автоматический уплотнитель по схеме Маршалла разработан для обеспечения стабильного и жесткого механизма для подготовки битумных образцов к испытаниям на устойчивость по схеме Маршалла. Уплотнитель UTAS-0782A для уплотнения образцов диаметром 4" имеет сверхпрочную конструкцию, которая хорошо выдерживает постоянное сотрясение, вызванное процессом уплотнения. Уплотнители оснащены ручным механизмом фиксации пресс-формы, который фиксирует пресс-форму на месте во время уплотнения и уменьшает вибрацию пресс-формы. Удобно расположенная панель управления состоит из кнопки Вкл/Выкл, кнопки аварийной остановки и счетчика прямого отсчета, используемого для установки необходимого количества ударов. Оператор может отслеживать количество ударов на жидкокристаллическом дисплее. Аппарат останавливается автоматически после заданного количества ударов. Стандартные модели могут поставляться с шкафом безопасности/шумоподавления. Шкаф облицован изнутри звукоизоляционным материалом для снижения уровня шума в соответствии с директивами CE (модель UTAS-0783A). UTAS-0667 Стальные Блоки по схеме Маршалла, которые могут использоваться для начального нагревания ножки молотка уплотнения и пресс-форм по схеме Маршалла, должны быть заказаны отдельно.

Характеристики

Частота ударов	55 ± 5 ударов/минут
Скользящий вес	4536 ± 9 г
Высота падения	457±3 мм
Диаметр трамбовочной поверхности	98,5 мм
Габариты	400х440х1550 мм
Вес	110 кг.